

Test	Vorschlag GOÄ	Erstattung (Faktor 1,15)	Einkaufspreis (inkl. MwSt.)	Differenz
Quantitative Schnelltests concile®α1 Reader / concile®Q100 Reader / concile®DUO Reader				
Anti-Müller-Hormon (FIA)	4069	50,27 €	19,04 €	31,23 €
CRP	3741	13,41 €	8,33 €	5,08 €
fT3 (FIA)	4022.H4	16,76 €	9,52 €	7,24 €
fT4 (FIA)	4023.H4	16,76 €	9,52 €	7,24 €
HbA1c	3561	13,41 €	5,95 €	7,46 €
Homocystein	4062	32,17 €	19,04 €	13,13 €
HPV High Risk ²	4405	53,63 €	31,54 €	22,09 €
Neopterin ^{2,3}	4069	50,28 €	23,80 €	26,48 €
PCT ^{2,3}	4069	50,28 €	23,21 €	27,07 €
Prolaktin (FIA)	4041	23,46 €	9,52 €	13,94 €
PSA	3908 H3	20,11 €	6,55 €	13,56 €
fPSA	3908 H3	20,11 €	7,74 €	12,37 €
sPLA2-IIA ²	4069	50,28 €	30,64 €	19,64 €
Testosteron (FIA) ³	4042	23,46 €	10,71 €	12,75 €
TSH	4030	16,76 €	8,93 €	7,83 €
UBC® Rapid ²	3911 H3	30,16 €	21,42 €	8,74 €
Vitamin D ³	4138	32,18 €	18,56 €	13,62 €
Quantitative Schnelltests GP Reader NT				
H. pylori (qualitativ)	4291	23,46 €	65,45 €	54,55 €
Pepsinogen I ^{2,3}	4062	32,18 €		
Pepsinogen II ^{2,3}	4062	32,18 €		
Gastrin-17 ^{2,3}	4051	32,18 €		
Qualitative Schnelltests kein Messgerät erforderlich				
Celiac Quick Test ²	3877	30,16 €	19,04 €	11,12 €
ScheBo® 2in1 Quick ²	3911 H3 + 3747	42,23 €	23,68 €	18,55 €
ScheBo® M2-PK Quick ²	3911 H3	30,16 €	21,00 €	9,16 €
UBC® Rapid VISUAL ²	3911 H3	30,16 €	15,47 €	14,69 €
URIN SYSTEM Chrom ²	9 × 4546 + 8 × 4611	88,53 €	31,24 €	57,29 €

1 Unverbindliche Empfehlung. Ggf. Leistung begründen: Bei Verdacht auf / Ausschluss von / Verlaufskontrolle. § 4 Abs. 2 Satz 1 der GOÄ beachten: Der Arzt kann Gebühren nur für selbstständige ärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). Für die mit H3 gekennzeichneten Untersuchungen ist der Höchstwert nach der Nummer 3631.H zu beachten: € 93,84 (Faktor 1,15).

2 Analogziffer: GOÄ § 6 Abs. 2: „Selbständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden.“
3 Wird eine Untersuchung mittels Ligandenassay, die obligatorisch eine Doppelbestimmung beinhaltet, als Einfachbestimmung durchgeführt, so dürfen nur zwei Drittel der Gebühr berechnet werden.



Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_BRS_α1_ο100_DUO_GPL_0326



Unsere Produktwelt

Quantitative Schnelltests und Messgeräte im Überblick



concile® α1 / α1 plus
Der Kompakte



concile® Ω100
Der Vielseitige



concile® DUO
Der Allrounder


Anti-Müller-Hormon (FIA) Eierstockreserve, Infertilität, PCOS	×	×	✓
CRP Infektionen, Entzündungen	✓	✓	✓
fT3 (FIA) Schilddrüsen-Diagnostik	×	×	✓
fT4 (FIA) Schilddrüsen-Diagnostik	×	×	✓
LH-FSH Zyklusstörungen, Infertilität	×	✓	✓
SHBG Störungen der Sexualhormone	×	✓	✓
HbA1c Diabetes-Diagnostik, Blutzuckerkontrolle	×	×	✓
Homocystein Homocysteinämie	×	×	✓
HPV High Risk HPV-bedingte Tumore	✓	✓	✓
Neopterin Virusinfektionen	×	✓	✓
PCT Bakterielle Infektionen	×	✓	✓
Prolaktin (FIA) Galaktorrhoe, Infertilität, Endometriose	×	×	✓
PSA Prostata Ca	×	✓	✓
fPSA Prostata Ca	×	✓	✓
sPLA2-IIA Kardiovaskuläres Risiko	×	✓	✓
Testosteron (FIA) Testosteronmangel, PCOS	×	×	✓
TSH Schilddrüsen-Diagnostik	×	✓	✓
UBC® Rapid Harnblasen Ca	✓	✓	✓
Vitamin D Vitamin D-Mangel	✓	✓	✓

Unsere Produktwelt

Alle Point-of-Care-Messgeräte



SQA-iO
Optimieren Sie die Spermienanalyse in Ihrer Praxis

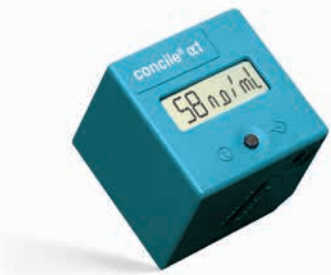

concile® α1 / α1 plus

Präzises Kompakt-Messgerät für die Sofortdiagnostik

Der **concile® α1** Reader ist ein hochwertiges Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik. Wegen seiner handlichen Maße eignet er sich ideal für den Praxisalltag und ist derzeit mit vier unserer Schnelltests kompatibel (CRP, HPV High Risk, UBC® Rapid, Vitamin D)



concile® Ω100

Vielseitiges Messgerät für die Sofortdiagnostik

Der **concile® Ω100** Reader ist ein präzises und vielseitiges Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik. Er misst jeden unserer Lateral Flow Assays. Das Gerät lässt sich an eine Praxis-Software anbinden und verfügt über einen ansteckbaren Drucker.



concile® DUO

Allround-Messgerät für zwei Testformate

Als Multispektralgerät misst der **concile® DUO** Reader sowohl die optische Dichte als auch die Lichtintensität. Daher kann das Gerät zwei Testformate auswerten: alle Lateral Flow Assays und Fluoreszenz-Immunoassays (FIA).



GP Reader NT

Messgerät für vier magenspezifische Marker

Der **GP Reader NT** ist das Messgerät für den **GastroPanel® Quick Test NT**, ein quantitativer Schnelltest für das gleichzeitige Screening von vier magenspezifischen Markern. Dieses innovative, nicht-invasive Testsystem kommt bei unspezifischen Magenbeschwerden zum Einsatz.

Quantitative Schnelltests im Detail concile® α1 / concile® α1 plus / concile® Ω100 / concile® DUO

Test	Indikationen	Probe	Probenvolumen	Inkubation (min)	Messbereich
AMH (FIA)	Eierstockreserve, Infertilität, PCOS	Serum	1. 50 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 80 µl verdünnte Probe in Testkassette	10	0,1–25 ng/ml
CRP	Infektionen, Entzündungen	Vollblut, Plasma, Serum	1. 10 µl Plasma oder Serum bzw. 20 µl Vollblut in Verdünnungspuffer 2. 90 µl (3 Tropfen) verdünnte Probe in Testkassette	15	0,5–100 mg/l
fT3 (FIA)	Schilddrüsen-Diagnostik	Vollblut, Plasma, Serum	1. 20 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 75 µl verdünnte Probe in Testkassette	15	1,5–46 pmol/l (pmol/l × 0,651 = pg/ml)
fT4 (FIA)	Schilddrüsen-Diagnostik	Vollblut, Plasma, Serum	1. 20 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 75 µl verdünnte Probe in Testkassette	15	1–100 pmol/l (pmol/l × 0,7769 = ng/l)
LH-FSH	Zyklusstörungen, Infertilität	Plasma, Serum	Jeweils 100 µl unverdünnte Probe in Testkassette	20	LH: 5–200 mIU/ml FSH: 2,5–100 mIU/ml
SHBG	Störungen der Sexualhormone	Plasma, Serum	1. 10 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 100 µl verdünnte Probe in Testkassette	15	5–200 nmol/l
HbA1c	Diabetes-Diagnostik	Vollblut	1. 5 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 80 µl verdünnte Probe in Testkassette	5	4–15%
Homocystein	Homocysteinämie	Plasma, Serum	1. 40 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 80 µl verdünnte Probe in Testkassette	15	2–50 µmol/l
HPV High Risk	HPV-bedingte Tumore	Serum	1. 100 µl dest. Wasser und 25 µl Serum in HPV-Reagenz mischen und 5 Minuten inkubieren 2. Gesamte gemischte Probe in Testkassette geben	15	250–15.000 ng/ml (Lot-abhängig)
Neopterin	Virusinfektionen	EDTA-Plasma	100 µl	20	2,5–100 nmol/l (ng/ml × 3,95 = nmol/l)
PCT	Bakterielle Infektionen	Vollblut, Plasma, Serum (kein EDTA)	100 µl Plasma oder Serum bzw. 120 µl Vollblut	15	0,1–10 ng/ml
Prolaktin (FIA)	Galaktorrhoe, Infertilität, Endometriose	Serum	1. 20 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 80 µl verdünnte Probe in Testkassette	20	1–4000 µIU/ml (µIU/ml × 0,047 = ng/ml)
PSA	Prostata Ca	Plasma, Serum	100 µl	20	0,5–10 ng/ml
fPSA	Prostata Ca	Plasma, Serum	100 µl	20	0,5–10 ng/ml
sPLA2-IIA	Kardiovaskuläres Risiko	EDTA-Plasma	1. 25 µl EDTA-Plasma in Testkassette 2. 4 Tropfen Puffer zufügen	10	20–500 ng/ml
Testosteron (FIA)	Testosteronmangel, PCOS	Serum	1. 20 µl Probe in Verdünnungspuffer 2. 80 µl verdünnte Probe in Testkassette	10	0,2–20 ng/ml (ng/ml × 34672 = nmol/l)
TSH	Schilddrüsen-Diagnostik	Serum, Plasma	100 µl	20	0,3–40 mIU/l
UBC® Rapid	Harnblasen Ca	Urin	1. Urin bis 1 ml-Marke in Verdünnungspuffer auffüllen 2. 75 µl (3 Tropfen) verdünnte Probe in Testkassette	10	5–300 µg/l
Vitamin D	Vitamin D-Mangel	Vollblut, Serum	1. 10 µl Vollblut oder 5 µl Serum in Puffer im UniSampler mischen 2. 3 Tropfen verdünnte Probe in Testkassette	15	10–100 ng/ml (ng/ml × 2,496 = nmol/l)

Quantitative Schnelltests im Detail GP Reader NT

Test	Indikationen	Probe	Messbereich
H. pylori (qualitativ)	Dyspeptische Symptome, atrophische Gastritis, H. pylori Infektion	EDTA-Plasma, Vollblut	Interpretation durch Algorithmus der Reader-Software
Pepsinogen I			
Pepsinogen II			
Gastrin-17			

Qualitative Schnelltests im Detail kein Messgerät erforderlich

Test	Indikationen	Probe	Probenvolumen	Inkubation (min)
Celiac Quick Test	Zöliakie	Vollblut, Plasma, Serum	Vollblut bis Markierung in Mikropipette, auf Testkassette geben, 30–60 Sek. warten, dann 2 Tropfen Puffer auftropfen oder 15 µl Serum oder Plasma + 135 µl Puffer (1:10 verdünnen), 125 µl tropfenweise auf Testkassette geben	10
ScheBo® 2in1 Quick™	Kolorektales Ca	sehr geringe Stuhlprobe	Stuhlprobe in rot-weißem Hb-Röhrchen und blau-weißem M2-PK-Röhrchen Gebrauchsanweisung beachten	–
ScheBo® M2-PK Quick™	Kolorektales Ca	sehr geringe Stuhlprobe	Stuhlprobe in blau-weißem M2-PK-Röhrchen Gebrauchsanweisung beachten	–
UBC® Rapid VISUAL	Harnblasen Ca	Urin	0,5 ml	–
URIN SYSTEM Chrom	Rezidivierende Harnwegsinfekte	Urin	0,5 ml Urin und Urinsediment	–